

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Pflegedecke (Md 40050^{TS})

Die Pflegedecke ist eine freundliche Form der Fixierung für unruhige Bewohner. Sie ist sowohl für den Benutzer als auch für das Pflegepersonal ideal. Sie bietet dem Patienten noch genügend Bewegungsfreiheit und ersetzt unangenehme Fixiermittel. Außerdem verhindert sie unbedecktes Liegen und wirkt im Bereich der Hygiene präventiv.

Mit Hilfe des Reißverschlusses kann die Intimpflege der Bewohner erfolgen, während diese in der Decke sitzen. Das Material ist sehr robust, feuerhemmend mit einem hohem Reißwiderstand. Die Pflegedecke ist im Grunde ein Laken, das in eine Jacke übergeht. Sie wird durch einen stabilen Reißverschluss geschlossen, der sich zum Fußende hin schließt.

Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.

Die Pflegedecke MUSS stets zusammen mit einem Bettgländer verwendet werden.



Md 40050^{TS}

Pflegedecke als Spannbettlaken um die Matratze, ärmellos, (Größe S/M, **L/XL**, XXL), Halsausschnitt mit Reißverschlusschutz, 2 seitliche Öffnungen mit Reißverschluss, Reißverschluss vorne.

Optional: * 40050 B: Reißverschluss an den Schultern
* 40050 ED: lange Ärmel

| | S/M | L/XL | XXL |
|------------------|-----|--------|------|
| Oberweite | <85 | 85-125 | >125 |

Pflegehinweise für die Qualität 1010:


1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Hilfsmittel für Pflegepersonal



1. Legen Sie die Pflegedecke wie ein Spannbettuch um die Matratze. Passen Sie bei Bedarf die Länge des Gummibands mit dem Gummiclip an.

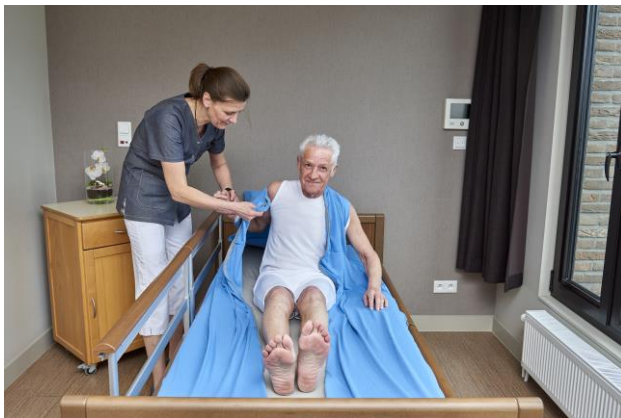

2. Schließen Sie die seitlichen Reißverschlüsse und öffnen Sie die Pflegedecke vom Fußende bis zur Halsöffnung.

3. Lassen Sie den Patienten auf der Matratze sitzen, stecken Sie die Arme durch die Armlöcher in die Jacke und schließen Sie den Reißverschluss. Schließen Sie die Schirmleiste mit den Kunststoffschnappern und heben Sie die Bettgitter in eine hohe Position.

